


Einbindung des VML-GK in easymed.


Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das VML-GK Lesegerät.

1) Starten Sie easymed.


2) Über *System* gehen Sie auf *Einstellungen*.

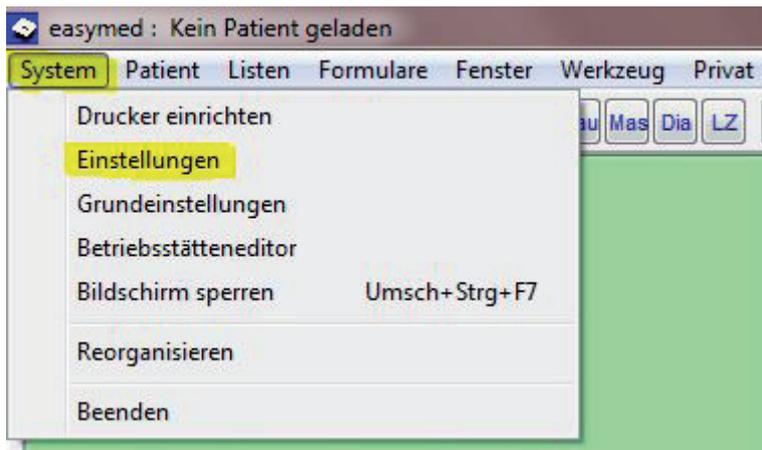

3) In dem Fenster System-Konfiguration wählen Sie den Menüpunkt *System*.

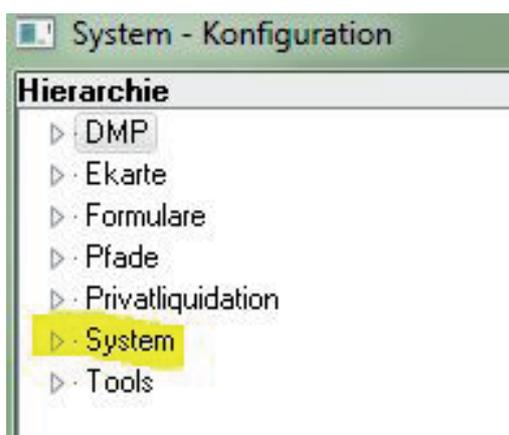

4) Sie sind nun im Fenster *der System-Konfiguration*, in welchen Sie nun den Punkt *Chipkarte* und *CT-API* auswählen.

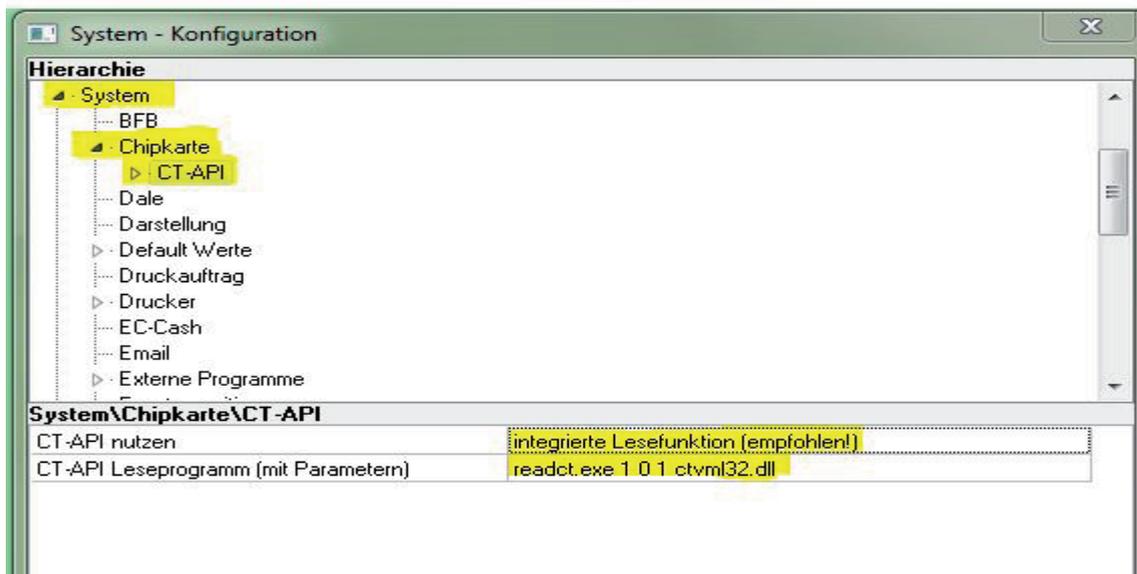


5) In dem geöffneten Fenster der CT-API nutzen wählen sie *integrierte Lesefunktion (empfohlen!)*.

Bei CT-Api Leseprogramm readct.exe 1 0 1 ctvml32.dll.

Falls mit der Einstellung des COM Ports 0 nicht möglich, dann Ihren COM-Port auswählen.

6) Anschließend wählen Sie den Menüpunkt *integrierte Lesefunktion* aus und danach den Unterpunkt *Gerät 1*.

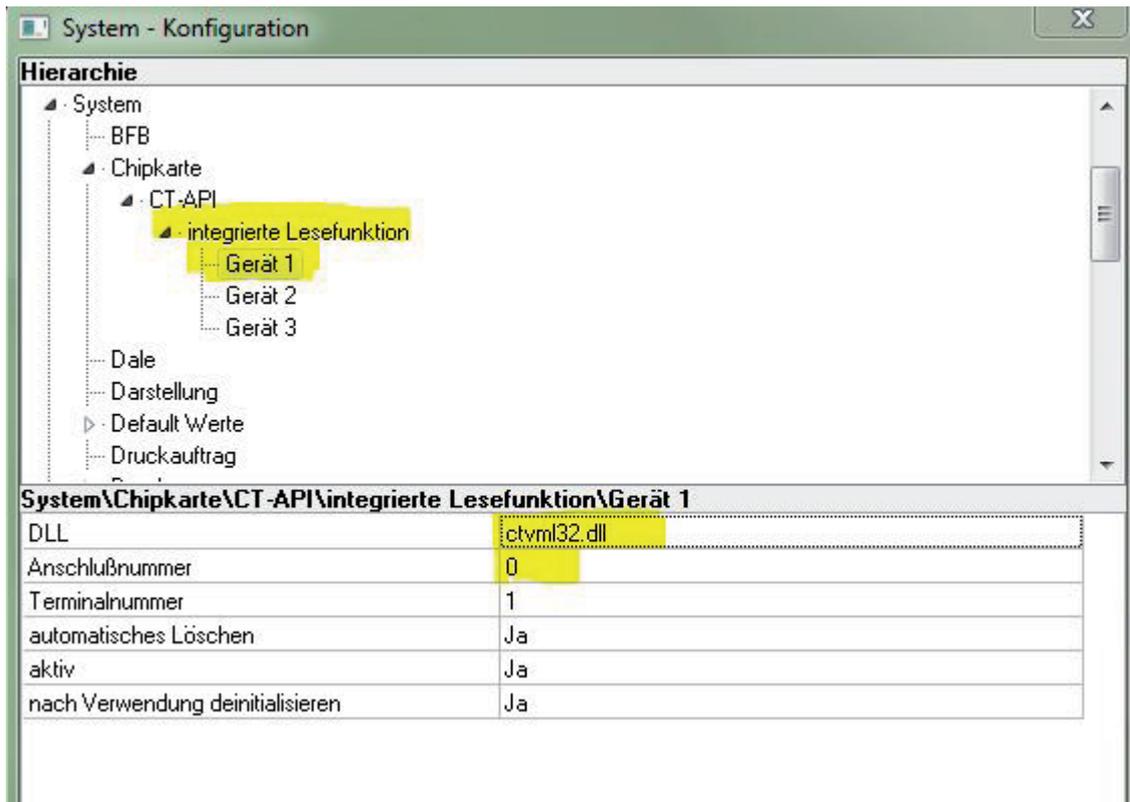

7) Bei der DLL geben Sie nun ctvml32.dll ein und bei der Anschlussnummer den Com-Port 0.

Übernehmen Sie die Einstellungen wie oben gezeigt.

8) Schließen Sie die Einbindung mit *OK* ab.